


## Endometrial sampling

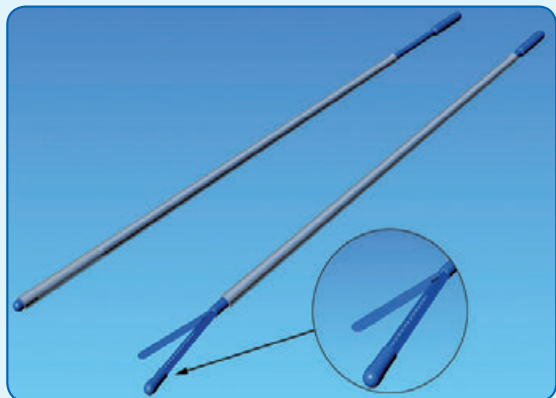

### CERVIRAM

Dispositivo per prelievo endometriale per esame citologico

Endometrial sampler for cytologic screening


Permette uno screening dell'endometrio facile e indolore evitando la dilatazione o la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorre su un mandrino con punta biforcata asimmetrica. Le protuberanze presenti sulle punte consentono un prelievo accurato e atraumatico del tessuto sulle pareti uterine.

It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction of the uterus neck. An outer sheath covers a mandrel with asymmetrical "V" shaped blades on the top. The protrusions placed on the blades allow an accurate and atraumatic sampling of endometrial cells.

Cod.	Descrizione - Description
720113	lung. 26 cm - length 26 cm Ø esterno 3,5 mm - O.D. 3.5 mm

Scatola da 150 pezzi.  
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

150 pcs. per box.  
Supplied in single pouch, single use, EtO sterilized and CE marked.

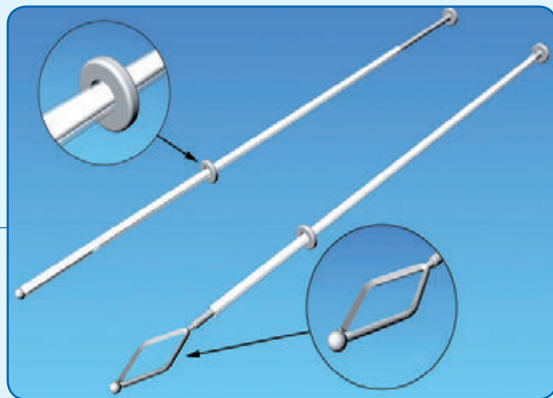

### ENDORAM

Curetta per biopsia endometriale per esame istologico

Curette for endometrial biopsy for histologic screening

Per il prelievo bioptico di cellule endometriali. Permette uno screening dell'endometrio facile e indolore, evitando la dilatazione o la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorre su un mandrino con punta a forma romboidale. Il profilo affilato consente un prelievo bioptico delle pareti uterine. Un fermo scorrevole è posto sulla guaina esterna per determinare la corretta profondità di inserimento.

Used to perform endometrial bioptic sampling. It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction of the uterus neck. An outer sheath covers a plunger having a rhomboidal shape at the tip. Sharp profile allows biopsy sampling of the uterine walls. An adjustable positioner is set on the outer sheath to determine the correct insertion depth.

Cod.	Descrizione - Description
720112	lung. 25 cm - length 25 cm Ø esterno 3,8 mm - O.D. 3.8 mm

Scatola da 100 pezzi.  
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

100 pcs. per box.  
Supplied in single pouch, single use, EtO sterilized and CE marked.

