



Rampipella

Dispositivo per prelievo endometriale
(muco - sperma)

Endometrial sampling device (mucus - sperm)

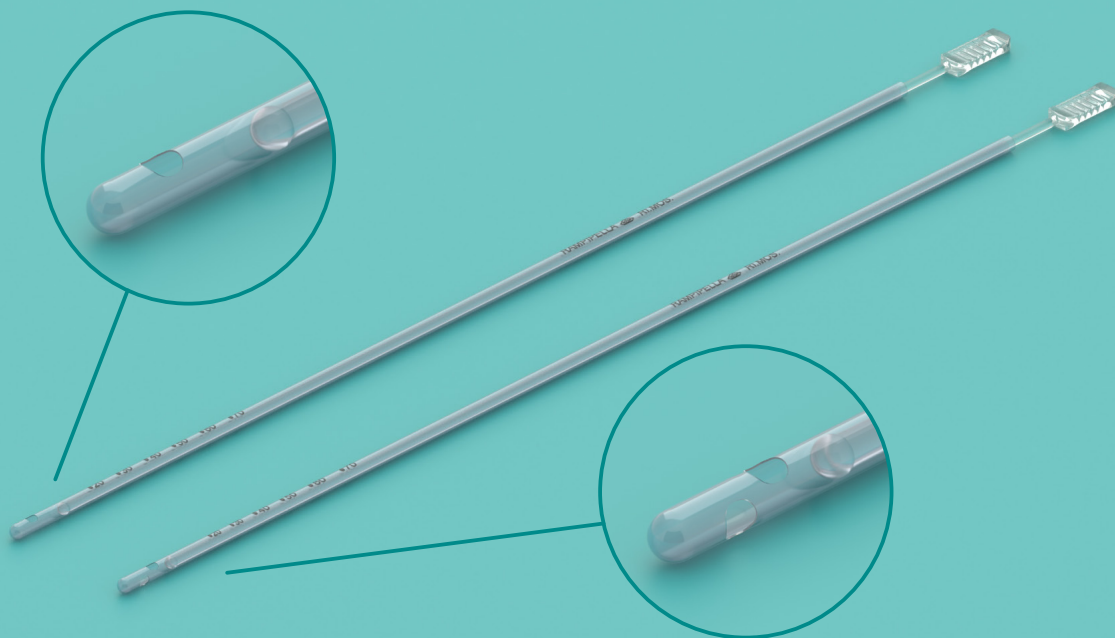

 Per un prelievo endometriale citologico facile e indolore.

La suzione del prelievo avviene manualmente tramite un mandrino che scorre all'interno della guaina esterna.


Cannula centimetrata con scala da 1 a 7 cm

(risoluzione 1 cm)*.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

Due versioni disponibili: con 1 foro laterale e con 2 fori laterali all'estremità.

* Fornisce una misura approssimativa.

 For a painless and easy endometrial cytologic sampling.

Sampling suction is performed manually through a mandrel that slides into an outer sheath.

Graduated cannula, ranging from 1 to 7 cm

(1 cm resolution)*.

Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Two versions available: with 1 or 2 side ports placed on the tip.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720196	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 1 foro Length 24,5 cm - O.D 3 mm - with 1 port	100 pz./pcs. *
720218	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 2 fori Length 24,5 cm - O.D 3 mm - with 2 ports	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

* Disponibile anche in scatole da 25 pezzi su richiesta

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

* Available in boxes of 25 pcs upon request

