
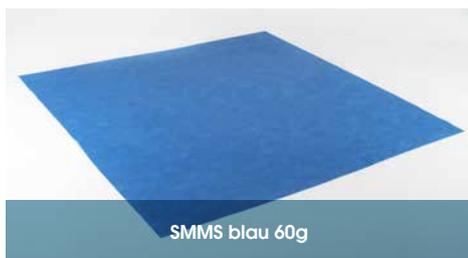


Bogenverpackungen Polypropylen (SMS) von stericlin®

Für jede Anwendung die passende Grammatatur – DIN EN ISO 11607

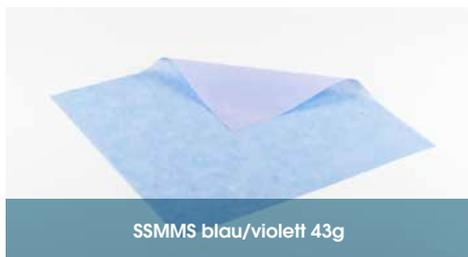

Stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS) sind äußerst reißfeste, widerstandsfähige und hervorragend drapierfähige Vliesstoffe aus reinen Kunststofffasern, die sich für alle Bogenverpackungsarten eignen. Je höher die Grammatatur des Vlieses, desto widerstandsfähiger ist die daraus hergestellte Weichverpackung. Alle stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS) entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

Unsere Polypropylen-Vliese bestehen aus mehreren Schichten Spunbond-Fasern (S) und Meltblown-Fasern (M). Spunbond-Schichten sorgen für eine außergewöhnliche Flexibilität und Drapierfähigkeit, während Meltblown-Schichten eine effektive Keimbarriere bilden.

Für Doppelverpackungen können Sie SMS-, Vlies- und Krepp-Verpackungen kombinieren - unabhängig von Farbe und Format. Beachten Sie bitte die in der DIN 58953 Teil 7 beschriebenen Packmethoden.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Bogenverpackungen Vlies Polypropylen SMS

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Kartoninhalt (Stück)
3FSMS355106	SMMS blau 37g	60 × 60	480
3FSMS355108	SMMS blau 37g	75 × 75	200
3FSMS355112	SMMS blau 37g	90 × 90	200
3FSMS355114	SMMS blau 37g	100 × 100	200
3FSMS355118	SMMS blau 37g	120 × 120	120
3FSMS355120	SMMS blau 37g	120 × 140	120
3FSMS355126	SMMS blau 37g	140 × 140	120
3FSMS355127	SMMS blau 37g	140 × 190	80
3FSMS360104	SSMMS blau/violett 43g	50 × 50	500
3FSMS360108	SSMMS blau/violett 43g	75 × 75	200
3FSMS360112	SSMMS blau/violett 43g	90 × 90	200
3FSMS360114	SSMMS blau/violett 43g	100 × 100	200
3FSMS360118	SSMMS blau/violett 43g	120 × 120	120
3FSMS360120	SSMMS blau/violett 43g	120 × 140	120
3FSMS360126	SSMMS blau/violett 43g	140 × 140	120
3FSMS360128	SSMMS blau/violett 43g	150 × 190	48
3FSMS365114	SMMS blau 60g	100 × 100	104
3FSMS365118	SMMS blau 60g	120 × 120	96
3FSMS365126	SMMS blau 60g	140 × 140	80