


20 Aspirazione intrauterina

Intrauterine aspiration

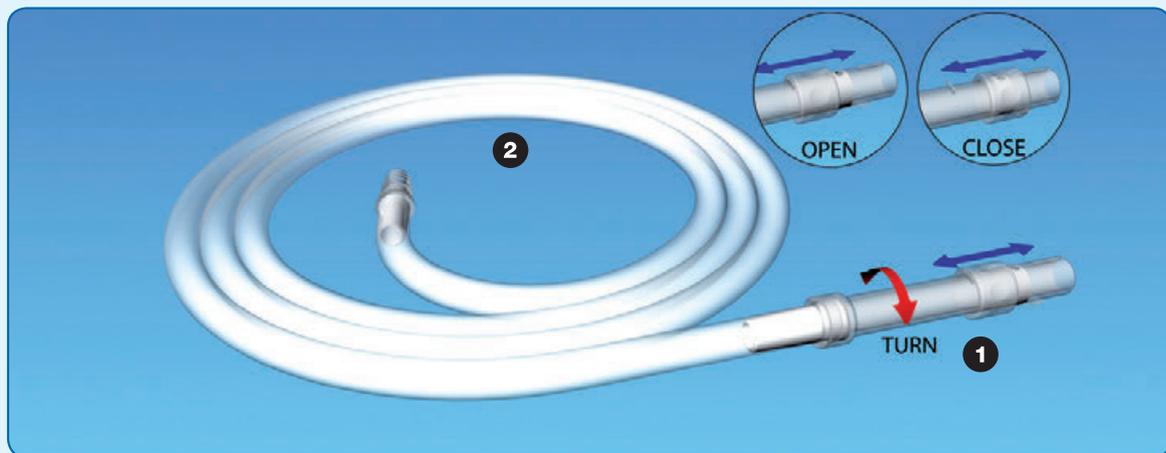

ROVAC

Set tubo di aspirazione Aspiration tubing set

Cod.	Descrizione - Description
720133 sterile	lung. 200 cm - length 200 cm Ø esterno 15 mm - O.D. 15 mm Ø interno 10 mm - I.D. 10 mm
720134 non sterile	
720041 sterile	manipolo senza tubo handle w/o tubing set
720941 bulk	

Ordine minimo: 20 pezzi.

Il prodotto codice 720133 è fornito in confezione singola e sterilizzato EtO;


il prodotto codice 720134 è fornito in confezione singola, non sterile.

I prodotti sono monouso e marcati CE.

A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri.

Minimum order quantity: 20 pcs. Item code 720133 is single packed and EtO sterilized; item code 720134 is single packed, non sterile. Products are single use and CE marked.

It is also available with a 3 meters tube upon request.

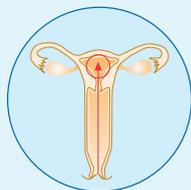

🇮🇹 Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo. Con manipolo rotante **(1)** connesso a un tubo di 2 metri **(2)** che termina con un adattatore per pompa di aspirazione. Il manipolo regola l'aspirazione attraverso una valvola di controllo azionabile semplicemente con un dito. Ruotando il manipolo di 360° si ottiene una evacuazione completa della cavità uterina evitando l'attorcigliamento del tubo; il corretto orientamento della punta della curetta è indicato da una tacca di riferimento impressa sul manipolo stesso. Lo spessore del tubo è tale che viene esclusa la possibilità di collabire e la trasparenza rende visibile il materiale aspirato. Compatibile con tutte le pompe di aspirazione sul mercato.

🇺🇸 For uterine evacuation and curettage in voluntary pregnancy termination or following miscarriage. It is provided with a rotating handle **(1)** connected to a 2 meters tubing set **(2)** ending with a suction pump adapter. Suction is regulated through a control valve that can be easily activated with one finger. 360° rotating handle allows a complete evacuation of the uterine cavity and prevents tubing twisting; a reference mark placed on the handle indicates the exact orientation of the curette tip. Tube thickness prevents any possible collapse and great transparency makes aspirated material visible. It can be used with all suction pumps available on the market.