


## Speculum and accessories

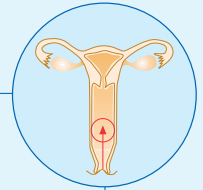

## SPECUVAG AS

Speculum vaginale con raccordo per aspirazione fumi e bloccaggio a paletta centrale

Vaginal speculum with smoke evacuator adapter and central key locking system

Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero. Da impiegarsi nelle procedure in cui si utilizza il laser o il diatermocoagulatore per poter evacuare i vapori e i fumi dalla zona di trattamento. Permette la regolazione dell'apertura vaginale attraverso il posizionamento delle valve ed il bloccaggio della paletta centrale che può essere piegata verso il basso per facilitare l'inserimento di strumentario ingombrante. Il raccordo di aspirazione fumi si adatta a un'ampia scelta di tubi di aspirazione con diametro interno da 5,5 a 10 mm. L'opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante le procedure in cui si utilizza il laser.

It allows to widen the vaginal canal and expose the uterus neck. Recommended to remove vapours and smoke out of the treated area during laser and diathermocoagulation procedures. It is possible to adjust the vaginal opening by fixing the blades and locking the central key. The central key can be bent down for an easier introduction of cumbersome instruments. Smoke evacuation adapter fits a range of aspiration tubings with i.d. from 5.5 to 10 mm. Opaque raw material avoids unpleasant reflections as a consequence of laser procedures.

Cod.	Modello - Type	Dim.
720227	Grande - Large	ø 30 mm

Scatola da 20 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

20 pcs. per box.  
Supplied single packed, single use, EtO sterilized and CE marked.

